

eBlot L1快速湿转仪

让你实验更EASY



eBlot L1快速湿转仪是一款高效的蛋白快速转膜系统，它采用金斯瑞自主研发的专利技术，该系统基于湿转的原理，集合了传统湿转稳定、均匀和半干转快速、高效的优势，同时避免了传统湿转耗时费力和半干转不均匀稳定性差的缺点，能够在9-15分钟内快速高效地实现蛋白从聚丙烯酰胺凝胶转移到PVDF膜或NC膜上的过程；仪器使用经过严格优化的转膜液和平衡液，能够确保大小蛋白同时高效转膜。无论从转膜的均一性、宽广的蛋白分子量大小和超低蛋白含量上都实现了无与伦比的转膜效果，给您带来全新的转膜体验。



扫码免费试用eBlot

转膜时间



9-15分钟

我们重新定义了
湿转时间

操作简单



一键完成

独立双通道设计
同时操作两样本

转膜试剂



安全配方

全力
呵护您的健康


eBlot转膜操作 | 简单 | 快速 | 高效

1 打开转膜夹子
平铺在桌面


2 依次平铺：干海棉
/膜/凝胶/干海棉

3 合夹放在仪器中
点击开始转膜

4 抗体孵育曝光
显影

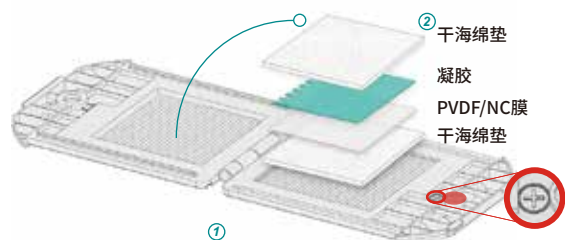

实验案例

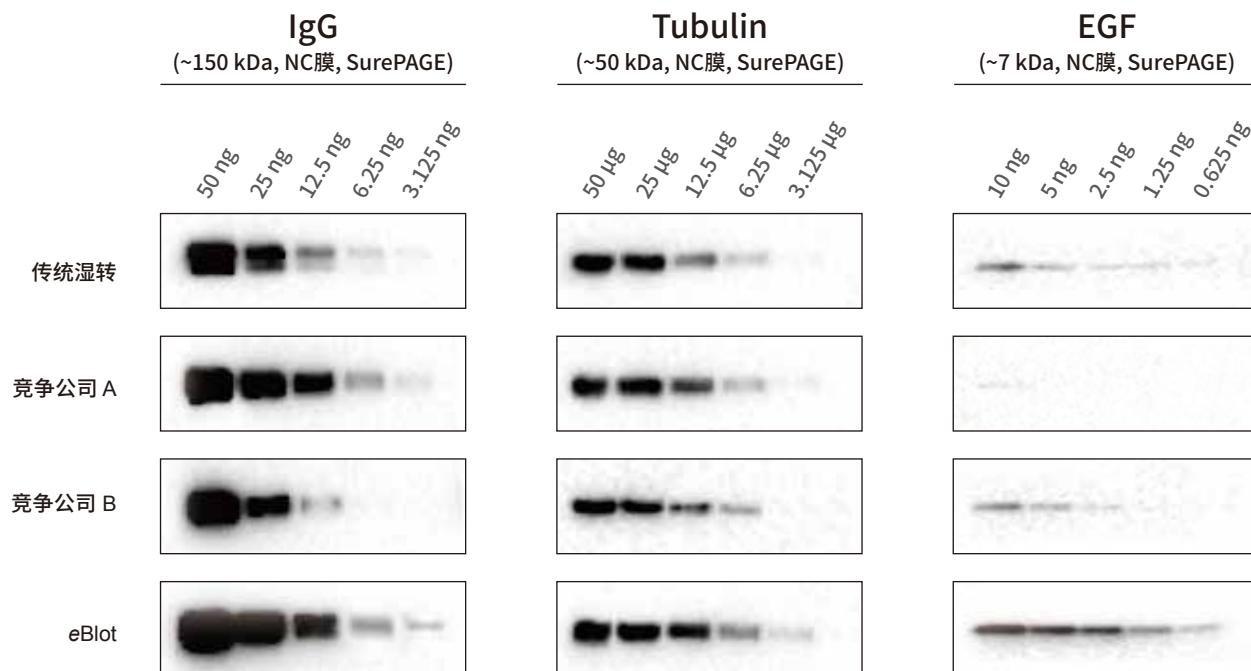

产品列表

产品名	Size	Cat. No.	目录价
eBlot L1 快速湿转仪	1 Unit	L00686C	询价
eBlot L1 转膜浓缩试剂盒 (NC膜基础)	1 kit (150次)	L00724C-150	询价
eBlot L1 转膜浓缩试剂盒 (NC膜基础)	1 kit (450次)	L00724C-450	询价
eBlot L1 转膜浓缩试剂盒 (PVDF膜基础)	1 kit (150次)	L00726C-150	询价
eBlot L1 转膜浓缩试剂盒 (PVDF膜基础)	1 kit (450次)	L00726C-450	询价
eBlot L1 转膜试剂盒 (NC膜)	1 kit (30次)	L00728C	询价
eBlot L1 转膜试剂盒 (PVDF膜)	1 kit (30次)	L00729C	询价

详情请扫描下方二维码



© 2018 Genscript Inc. All right reserved.
eBlot is a trademark of Genscript Biotech Corporation.

www.genscript.com.cn